


Bante 932 实验室水质硬度计



功能特征

- 2至5点校准, 由低至高浓度
- 可选水质硬度单位 - 德国度 (°dH), 英国度 (°e), 法国度 (°fH), mg/L, mmol/L
- 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
- 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
- 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表
- 设置菜单可自定义校准点数量、稳定性条件、日期与时间等
- 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置
- 扩展内存, 储存或调阅至多500组数据
- USB通讯接口, 易于传输数据至个人电脑

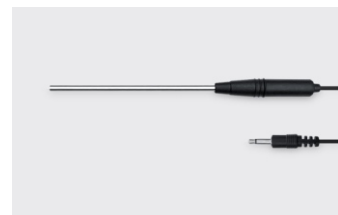

标准配置

测量仪, ISE-WH水质硬度电极(英国制造), 温度探棒, 标准液, 离子强度调节剂, 电极架, USB数据线, 电源适配器

技术参数

型号		Bante 932
水质硬度	测量范围	0.05...200mmol/L, 0...1122°dH, 0...2000°fH, 0...1404°e, 0...8020mg/L (Ca ²⁺), 0...19999mg/L (CaCO ₃), 0...11220mg/L (CaO)
	显示分辨率	0.001, 0.01, 0.1, 1
	测量精度	全量程±1%
	校准点	2...5点 (0.01, 0.1, 1, 10, 100mmol/L)
温度	测量范围	0.0...105.0°C
	显示分辨率	0.1
	测量精度	±0.5°C
	偏移校准	1点, 测量值±10°C
其它参数	温度补偿范围	0...50°C, 手动或自动
	稳定性条件	手动或自动终点锁定
	校准到期提醒	1至31天或关闭
	数据储存	500组
	通讯输出	USB
	连接器	BNC, 3.5mm话筒插
	显示屏	定制液晶显示屏 (125 × 100mm)
电源类型	DC5V电源适配器	
外形尺寸	210 (长) × 188 (宽) × 60 (高) mm	
重量	1.5kg	